


LANAFORM


Bodyscan Massager



1

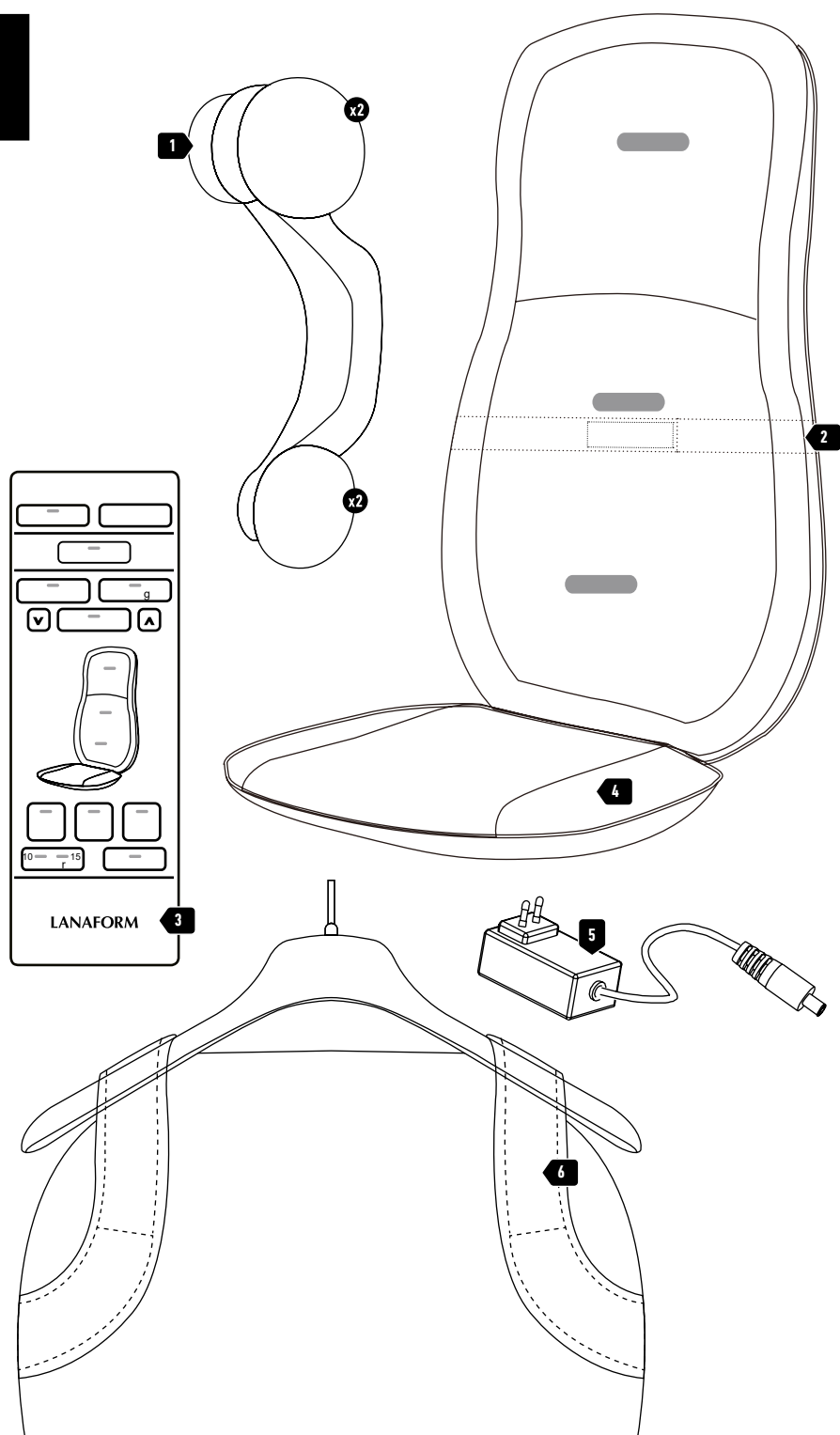

2

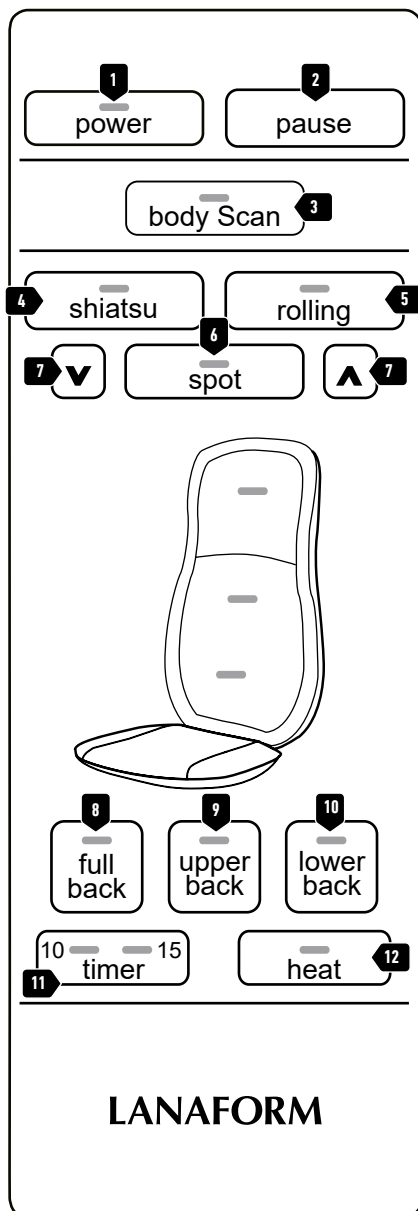

Obsah balení

- 1 podložka Bodyscan Massager
- 1 dálkové ovládání
- 1 napájecí kabel
- 1 návod k použití

Opatření pro použití

⚠ Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny, zejména tyto základní bezpečnostní pokyny

📷 Fotografie a další zobrazení produktu v tomto návodu a na obalu jsou co nejpřesnější, ale nemusí poskytovat dokonalou reprodukci produktu

⚠ Varování

Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopili související rizika. **Dětem nesmí být dovoleno hrát si se zařízením. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Povrch přístroje je horký.**

Lidé, kteří jsou citliví na teplo, by měli být při používání tohoto zařízení opatrní. **Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno společností Lanaform, nebo které není dodáno s tímto zařízením. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za podobný, který je k dispozici u dodavatele nebo v jeho poprodejním oddělení. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozená zástrčka, pokud zařízení nepracuje správně, upadlo na podlahu, pokud je poškozeno nebo spadlo do vody. Nechte zařízení zkontrolovat a opravit u dodavatele nebo jeho poprodejním oddělení. Nenoste toto zařízení za napájecí kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť. S tímto zařízením nikdy nepoužívejte špendlíky nebo jiné kovové úchyty. Po použití nebo před čištěním zařízení vždy odpojte. Pokud zařízení spadne do vody, ihned jej odpojte, než jej vyndáte. Toto elektrické zařízení nesmí být nikdy ponecháno zapnuté bez dozoru. Odpojte jej vždy, když jej nepoužíváte. Udržujte napájecí**

kabel mimo horké povrchy. **Nepoužívejte** tento výrobek před spaním. **Masáž** působí jako stimulant, který může oddálit nástup spánku. **Nikdy** nedovolte, aby vám zařízení spadlo a nikdy nevkládejte předměty do žádného z otvorů. **Nikdy** nepoužívejte toto zařízení v místnosti, kde se používají aerosoly (spreje), nebo v místnosti, kde se podává kyslík. **Nepoužívejte** toto zařízení pod krytem nebo pod polštářem. **Nadměrné** teplo může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osoby. **Chcete-li** zařízení odpojit, ujistěte se, že je tlačítko „POWER“ vypnuté, než vytáhnete zástrčku ze zásuvky. **Pokud** máte obavy o své zdraví, před použitím tohoto zařízení se poraďte s lékařem. **Nepoužívejte** zařízení:

- V případě patologických změn nebo lézí na zádech (např. vyklouznutí ploténky, otevřená rána)
- Během těhotenství
- Během spánku
- Ve vozidle
- Pro zvířata

- Při provádění činností, během nichž by neočekávaná reakce mohla být nebezpečná
- Po vstřebání látek, které omezují smyslové vnímání (např. léky s analgetickým účinkem, alkohol)

Pokud při používání tohoto zařízení pocítíte jakoukoli bolest, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se se svým lékařem. **Nepoužívejte** toto zařízení déle než 15 minut v kuse (nebezpečí přehřátí). **Před** opětovným použitím jej nechte alespoň 15 minut vychladnout. **Nikdy** nepoužívejte toto zařízení na žádnou část těla, která je oteklá nebo zanícená nebo pokud máte vyrážku. **Vyžádejte** si lékařskou radu před použitím přístroje, pokud:

- Trpíte závažným onemocněním nebo jste podstoupili operaci horní části těla
- Máte kardiostimulátor, implantát(y), nebo jakýkoli jiný zdravotnický prostředek, trombózu, cukrovku
- Jestliže cítíte jakoukoli bolest s nejasnými příčinami.

Tento produkt je neprofesionální masážní přístroj určený k

uvolnění unavených svalů. **Nepoužívejte** toto zařízení jako náhradu lékařského ošetření. Je určen pouze pro domácí a neprofesionální použití. **Nikdy nepoužívejte** pod přikrývkou / prostěradlem, mohlo by dojít k ucpání vzduchových otvorů. **Zařízení** by se nadměrně zahřálo, což může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

⚠ Varování

Při používání vždy noste oblečení. **Nepoužívejte** na holou pokožku, abyste předešli možnému podráždění.

Nepoužívejte na citlivou pokožku nebo v oblastech se špatným krevním oběhem.

Nevystavujte extrémním teplotám ani vlhkosti.

Stejně jako jakýkoli elektrický spotřebič, i toto masážní zařízení musí být používáno s opatrností a péčí, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Proto zařízení nepoužívejte:

- Při jiném síťovém napětí, než je uvedené na zařízení,
- V žádném případě nepoužívejte, pokud zařízení nebo

jeho příslušenství vykazuje viditelné poškození,

- Během bouřky

V případě závady nebo poruchy okamžitě zastavte a odpojte zařízení ze zásuvky. **Netahejte** za napájecí kabel ani za zařízení, abyste odpojili zástrčku ze zásuvky. **Nikdy nedržte** ani nenoste zařízení za napájecí kabel. **Nesvírejte**, neohýbejte ani nekrúte kabel. **Nevpichujte** do něj jehly ani jiné ostré předměty. **Ujistěte se**, že masážní zařízení, spínač, zástrčka a napájecí kabel nepřijdou do kontaktu s vodou, párou ani jinými kapalinami. **Pro toto zařízení používejte:**

- Pouze v interiéru, v místnostech chráněných před vlhkostí (např. nikdy nepožívejte v koupelně, v sauně),
- Pouze se suchýma rukama

Představení

Děkujeme, že jste si vybrali Lanaform Bodyscan Massager. Bodyscan Massager je masážní potah sedadla se 4 masážními hlavicemi, které dokonale napodobují masáž shiatsu a rolovací masáž. S funkcí skenování můžete využít jedinečnou masáž přizpůsobenou vašemu tělu! Ať už se používá na celá záda a krk nebo jen na konkrétní bod, masážní efekt je zvláště účinný pro uvolnění stažených svalů a tonizaci

unavených tkání. Přístroj vám přináší blahodárnou relaxaci, díky které zapomenete na každodenní stres.

Popis

Zařízení ☒ 1

- 01 Čtyři masážní hlavice
- 02 Upevňovací popruhy
- 03 Dálkové ovládání
- 04 Sedák
- 05 Napájecí kabel
- 06 Popruh na zavěšení

Popis dálkového ovládání ☒ 2

- 01 POWER: tlačítko zapnutí/vypnutí a počáteční reset masážního mechanismu
- 02 PAUSE: okamžitě zastaví zařízení
- 03 BODY SCAN: tlačítko pro aktivaci skenování těla
- 04 SHIATSU: tlačítko pro výběr režimu masáže shiatsu
- 05 ROLLING: tlačítko pro výběr režimu rolovací masáže
- 06 SPOT: tlačítko pro výběr masážní oblasti (bodová masáž)
- 07 ŠIPKY NAHORU a DOLŮ: tlačítka pro nastavení výšky (bodová masáž)
- 08 FULL BACK: masáž celých zad a šíje
- 09 UPPER BACK: masáž horní části zad
- 10 LOWER BACK: masáž dolní části zad
- 11 TIMER: tlačítko pro výběr 10 nebo 15 minut
- 12 HEATÍ: tlačítko pro zapnutí/

vypnutí funkce ohřevu

Příprava před použitím

- 01 Položte Bodyscan Massager svisle na vhodnou židli se sedákem a opěradlem. Ujistěte se, že je sedací část umístěna tak, aby byla v plném kontaktu se sedákem židle a v adekvátní výšce vašich zad.
- 02 Přístroj Bodyscan zajistěte pomocí popruhů.
- 03 Zapojte zařízení do elektrické sítě.

Instrukce

- 01 Přitiskněte záda svisle na masážní přístroj. Budete muset sedět rovně, abyste zajistili přesnou palpaci zad. Umožníte tím aktivaci funkce skenování těla, která měří velikost uživatele. Na začátku opatrně přitlačte záda k masážní podložce. Ujistěte se, že sedíte na sedadle pohodlně a s rovnými zády. Sedíte uprostřed tak, aby se masážní hlavice pohybovaly správně vlevo a vpravo od vaší páteře.
Pečlivě zkontrolujte, zda je pro vás masážní poloha příjemná, a poté postupně přesuňte váhu směrem k masážnímu zařízení. Masáž by měla být vždy příjemná a uvolňující.

Pokud je masáž bolestivá nebo nepříjemná, přerušte ji nebo změňte polohu přístroje.

02 Zapněte masážní zařízení stisknutím tlačítka POWER. Po celou dobu palpce zad bliká na dálkovém zařízení tlačítko BODYSCAN. Po ukončení palpce se aktivuje masážní program „Shiatsu“. LED diody indikují právě používanou masážní funkci.

03 Vyberte si svůj masážní režim:

- **SHIATSU:** Kombinace shiatsu a rolovací masáže aplikované na záda a šíji
- **ROLLING:** Rolovací masáž aplikovaná na záda a šíji.

04 Vyberte si oblast masáže:

- **CELÁ ZADA:** celá záda a krk
- **HORNÍ ZÁDA:** horní část zad
- **DOLNÍ ZÁDA:** spodní část zad
- **SPOT:** pomocí šipek „nahoru“ a „dolů“ vyberte konkrétní místo masáže zad.

05 Funkci ohřevu zapněte nebo vypněte stisknutím tlačítka HEAT.

06 Vyberte dobu (10 nebo 15 minut). Při výběru masážní oblasti se aktivuje automatické vypnutí, které se nastaví na 15 minut. Stisknutím tlačítka časovače lze automatické vypnutí nastavit na 10 nebo 15 minut. Upozornění: Pokud změníte čas na časovači, začne odpočítávat znovu od nuly. Abyste zabránili přehřátí přístroje, zvolte maximální dobu masáže na začátku a

během masáže ji neměňte.

07 Pokud chcete masáž ukončit před koncem zvolené doby, stiskněte tlačítko POWER. Masážní hlavice se vrátí do výchozí polohy. Neodpojujte zařízení od sítě během provozu. Po vypnutí zařízení vždy vyčkejte několik okamžiků, než se hlavice vrátí do své výchozí polohy.

Čištění

▲ Údržba

01 Odpojte sedák od zdroje napájení a počkejte několik minut, než jej začnete čistit.

02 Vyčistěte jej měkkou, mírně navlhlou houbou.

03 Nikdy nedovolte, aby voda nebo jiná tekutina přišla do kontaktu s podložkou.

04 Při čištění jej neponořujte do kapaliny.

05 K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče nebo ředidla.

06 Před opětovným použitím počkejte, až bude zařízení zcela suché.

Skladování

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej uchovávat v původním obalu na suchém místě a nepokládat na něj žádné předměty. Zařízení můžete také zavěsit do šatní skříň pomocí věšáku. K tomu je třeba zasunout věšák do závěsného popruhu umístěném na boku zařízení. Ujistěte se, že používáte stabilní dřevěný

věšák, který unese váhu zařízení. Vyvarujte se kontaktu s ostrými hranami a jinými špičatými předměty, které by mohly pořezat nebo propíchnout

povrch látky. Nezavěšujte polštář za kabel ručního ovládání nebo napájecího kabelu.

⊗ Odstraňování problémů

☹ Problém	🔍 Příčina	😊 Řešení
Masážní hlavice se pohybují příliš pomalu.	Masážní hlavice jsou vystaveny nadměrnému namáhání.	Snižte tlak při masáži.
Masážní hlavice se pohybují pouze v horní nebo dolní oblasti.	Masáž byla aktivována pouze pro určitou oblast.	Stisknutím tlačítka celá, horní část zad nebo dolní část zad změňte/rozšíříte masážní oblast.
Masážní hlavice se nepohybují.	Zařízení není zapojeno.	Připojte zařízení a zapněte jej.
	Zařízení není zapnuté	Zapněte masážní přístroj pomocí tlačítka POWER. Vyberte oblast, kterou chcete masírovat.
	Spustil se systém ochrany proti přehřátí, zařízení je poškozené.	Kontakujte prodejce nebo poprodejní oddělení.

Technické údaje

- Označení produktu: LA110318
- Napájení: 12VDC, 2,5A
- Rozměry: 108 x 40 x 10,9cm
- Hmotnost: cca. 9,0 kg



Poradenství při likvidaci odpadu

Celý obal je vyroben z ekologicky bezpečných materiálů, které lze odevzdat ve vašem místním třídícím středisku a použít je jako druhotné suroviny. Karton lze umístit do koše na recyklaci papíru. Obalovou fólii odneste do místního třídícího a recyklačního střediska.

Jakmile přístroj přestanete používat, zlikvidujte jej ekologicky a v souladu s právními předpisy.

Omezená záruka

Lanaform poskytuje na tento produkt záruku na jakoukoli materiálovou nebo výrobní vadu po dobu dvou let od data nákupu, s výjimkou případů popsaných níže.

Záruka Lanaform se nevztahuje na způsobené škody v důsledku běžného opotřebení. Zároveň záruka nepokryje poškození způsobené hrubým, nevhodným nebo nesprávným použitím, nehody, použití neschváleného

příslušenství, změny provedené na produktu nebo jiné okolnosti jakéhokoli druhu, které jsou mimo kontrolu Lanaform. Společnost Lanaform nemůže nést odpovědnost za žádný typ značné, nepřímé nebo specifické škody.

Všechny implicitní záruky týkající se vhodnosti produktu jsou omezeny na dobu dvou let od prvního data

nákupu, pokud lze dodat kopii dokladu o koupi.

Po obdržení vašeho zařízení Lanaform opraví nebo vymění váš spotřebič podle svého uvážení a vrátí vám jej. Záruka je platná pouze prostřednictvím servisního centra Lanaform. Jakýkoli pokus o údržbu tohoto produktu osobou jinou než servisním střediskem společnosti Lanaform způsobí neplatnost této záruky.

Obsah balenia

- 1 podložka Bodyscan Massager
- 1 diaľkové ovládanie
- 1 napájací kábel
- 1 návod na použitie

Opatrenia pre použitie

Δ Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny, najmä tieto základné bezpečnostné pokyny.

☒ Fotografie a ďalšie zobrazenia produktu v tomto návode a na obale sú čo najpresnejšie, ale nemusia poskytovať dokonalú reprodukciu produktu.

Δ Varovanie

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili súvisiace riziká. **Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so zariadením. Čistenie a údržba nesmú byť vykonávané deťmi bez dozoru. Deti sa so zariadením nesmú hrať.**

Povrch prístroja je horúci. Ľudia, ktorí sú citliví na teplo, by mali byť pri používaní tohto zariadenia opatrní. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané spoločnosťou Lanaform, alebo ktoré nie je dodané s týmto zariadením. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za podobný, ktorý je k dispozícii u dodávateľa alebo v jeho popredajnom oddelení. Nepoužívajte toto zariadenie, pokiaľ je poškodená zástrčka, pokiaľ zariadenie nepracuje správne, spadlo na podlahu, pokiaľ je poškodené alebo spadlo do vody. Nechajte zariadenie skontrolovať a opraviť u dodávateľa alebo jeho popredajnom oddelení. Nenoste toto zariadenie za napájací kábel a nepoužívajte kábel ako rukoväť. S týmto zariadením nikdy nepoužívajte špendlíky alebo iné kovové úchyty. Po použití alebo pred čistením zariadenie vždy odpojte. Pokiaľ zariadenie spadne do vody, ihneď ho odpojte, než ho vyberiete. Toto elektrické zariadenie nesmie byť nikdy

ponechané zapnuté bez dozoru. **O**dpojte ho vždy, keď ho nepoužívate. **U**držujte napájací kábel mimo horúcich povrchov. **N**epoužívajte tento výrobok pred spaním. **M**asáž pôsobí ako stimulant, ktorý môže oddialiť nástup spánku. **N**ikdy nedovoľte, aby vám zariadenie spadlo a nikdy nevkladajte predmety do žiadneho z otvorov. **N**ikdy nepoužívajte toto zariadenie v miestnosti, kde sa používajú aerosóly (spreje), alebo v miestnosti, kde sa podáva kyslík. **N**epoužívajte toto zariadenie pod krytom alebo pod vankúšom. **N**admerne teplo môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osoby. **A**k chcete zariadenie odpojiť, uistite sa, že je tlačidlo „POWER“ vypnuté, než vytiahnete zástrčku zo zásuvky. **A**k máte obavy o svoje zdravie, pred použitím tohto zariadenia sa poraďte s lekárom. **N**epoužívajte zariadenie:

- V prípade patologických zmien alebo lézií na chrbte (napr. vyklútnutie platničky, otvorená rana)
- Počas tehotenstva
- Počas spánku

- Vo vozidle
- Pre zvieratá
- Pri vykonávaní činností, počas ktorých by neočakávaná reakcia mohla byť nebezpečná
- Po vstrebaní látok, ktoré obmedzujú zmyslové vnímanie (napr. lieky s analgetickým účinkom, alkohol)
- V prípade patologických zmien alebo lézií na chrbte (napr. vyklútnutie platničky, otvorená rana)
- Počas tehotenstva
- Počas spánku
- Vo vozidle
- Pre zvieratá
- Pri vykonávaní činností, počas ktorých by neočakávaná reakcia mohla byť nebezpečná
- Po vstrebaní látok, ktoré obmedzujú zmyslové vnímanie (napr. lieky s analgetickým účinkom, alkohol)

Ak pri používaní tohto zariadenia pocítite akúkoľvek bolesť, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom. **N**epoužívajte toto zariadenie dlhšie ako 15 minút v kuse (nebezpečenstvo prehriatia). **P**red

opätovným použitím ho nechajte aspoň 15 minút vychladnúť. **Nikdy** nepoužívajte toto zariadenie na žiadnu časť tela, ktorá je opuchnutá alebo zapálená alebo ak máte vyrážku. **Vyžiadať** si lekársku radu pred použitím prístroja, ak:

- Trpíte závažným ochorením alebo ste podstúpili operáciu hornej časti tela
- Máte kardiostimulátor, implantát(y), alebo akúkoľvek inú zdravotnícku pomôcku, trombózu, cukrovku
- Ak cítite akúkoľvek bolesť s nejasnými príčinami.

Tento produkt je neprofesionálny masážny prístroj určený na uvoľnenie unavených svalov. Nepoužívajte toto zariadenie ako náhradu lekárskeho ošetrovania. Je určený iba na domáce a neprofesionálne použitie. Nikdy nepoužívajte pod prikrývkou / prestieradlom, mohlo by dôjsť k upchatiu vzduchových otvorov. **Zariadenie** by sa nadmerne zahrialo, čo môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

⚠ Varovanie

Pri používaní vždy noste oblečenie. **Nepoužívajte** na holú pokožku, aby ste predišli možnému podráždeniu.

Nepoužívajte na citlivú pokožku alebo na miestach so zlým krvným obehom.

Nevystavujte extrémnym teplotám ani vlhkosti.

Tak ako každý elektrický spotrebič, aj toto masážne zariadenie musí byť používané s opatrnosťou a starostlivosťou, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom. **Preto** zariadenie nepoužívajte:

- Ak je napätie v sieti odlišné od toho, ktoré je uvedené na zariadení,
- V žiadnom prípade, ak zariadenie alebo jeho príslušenstvo vykazuje viditeľné poškodenie,
- Počas búrky

V prípade poruchy alebo závažnej poruchy zariadenie okamžite vypnite a odpojte zo zásuvky. **Neťahajte** za napájací kábel ani za zariadenie, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky. **Nikdy** nedržte ani nenoste zariadenie za napájací

kábel. **Nestláčajte**, neohýbajte ani nekrúťte kábel. **Neprepichujte** ho ihlami ani inými ostrými predmetmi. **Uistite sa**, že masážne zariadenie, spínač, zástrčka a napájací kábel neprídu do kontaktu s vodou, parou alebo inými kvapalinami. **Preto** zariadenie používajte:

- Len v interiéri, v miestnostiach chránených pred vlhkosťou (napr. nikdy ho nepoužívajte v kúpeľni, v saune),
- Len so suchými rukami

Predstavenie

Ďakujeme, že ste si vybrali Lanaform Bodyscan Massager. Bodyscan Massager je masážny poťah sedadla so 4 masážnymi hlavicami, ktoré dokonale napodobňujú masáž shiatsu a rolovaciu masáž. S funkciou skenovania môžete využiť jedinečnú masáž prispôbenú vášmu telu! Či už sa používa na celý chrbát a krk alebo len na konkrétny bod, masážny efekt je obzvlášť účinný na uvoľnenie stiahnutých svalov a tonizáciu unavených tkanív. Prístroj vám prináša blahodarnú relaxáciu, vďaka ktorej zabudnete na každodenný stres.

Popis

Zariadenia 1

- 01** Štyrmasážnehlavice
- 02** Upevňovaciepopruhy
- 03** Diaľkovéovládanie

04 Sedák

05 Napájacíkábel

06 Popruhnazavesenie

Dálkový ovladač 2

- 01** POWER: tlačidlo zapnutia/vypnutia a počiatočný reset masážneho mechanizmu
- 02** PAUSE: okamžite zastaví zariadenie
- 03** BODY SCAN: tlačidlo pre aktiváciu skenovania tela
- 04** SHIATSU: tlačidlo pre výber režimu masáže shiatsu
- 05** ROLLING: tlačidlo pre výber režimu rolovacej masáže
- 06** SPOT: tlačidlo pre výber masážnej oblasti (bodová masáž)
- 07** ŠÍPKY HORE a DOLE: tlačidlá pre nastavenie výšky (bodová masáž)
- 08** FULL BACK: masáž celého chrbta a šije
- 09** UPPER BACK: masáž hornej časti chrbta
- 10** LOWER BACK: masáž dolnej časti chrbta
- 11** 1TIMER: tlačidlo pre výber 10 alebo 15 minút
- 12** HEATÍ: tlačidlo pre zapnutie/vypnutie funkcie ohrevu

Príprava pred použitím

- 01** Položte Bodyscan Massager zvisle na vhodnú stoličku so sedákom a operadlom. Uistite sa, že je sedacia časť umiestnená tak, aby bola v plnom kontakte so sedákom stoličky av

adekvátnej výške vášho chrbta.

02 Prístroj Bodyscan zaistíte pomocou popruhov.

03 Zapojte zariadenie do elektrickej siete.

Inštrukcie

01 Pritlačte chrbát zvisle na masážny prístroj. Budete musieť sedieť rovno, aby ste zaistili presnú palpáciu chrbta. Umožníte tým aktiváciu funkcie skenovania tela, ktorá meria veľkosť užívateľa. Na začiatku opatrne pritlačte chrbát k masážnej podložke. Uistite sa, že sedíte na sedadle pohodlne a rovným chrbtom. Sedte uprostred tak, aby sa masážne hlavice pohybovali správne vľavo a vpravo od vašej chrbtice. Starostlivo skontrolujte, či je pre vás masážna poloha príjemná, a potom postupne presuňte váhu smerom k masážnemu zariadeniu. Masáž by mala byť vždy príjemná a uvoľňujúca. Pokiaľ je masáž bolestivá alebo nepríjemná, prerušte ju alebo zmeňte polohu prístroja.

02 Zapnite masážne zariadenie stlačením tlačidla POWER. Po celý čas palpácie chrbta bliká na diaľkovom zariadení tlačidlo BODYSCAN. Po ukončení palpácie sa aktivuje masážny program „Shiatsu“. LED diódy indikujú práve používanú masážnu funkciu.

03 Vyberte si svoj masážny režim:

- **SHIATSU:** Kombinácia shiatsu a rolovacej masáže aplikovanej na chrbát a šiju
- **ROLLING:** Rolovacia masáž aplikovaná na chrbát a šiju.

04 Vyberte si oblasť masáže:

- **CELÁ ZADA:** celý chrbát a krk
- **HORNÝ CHYB:** horná časť chrbta
- **DOLNÝ CHYB:** spodná časť chrbta
- **SPOT:** pomocou šípok „hore“ a „dole“ vyberte konkrétne miesto masáže chrbta.

05 Funkciu ohrevu zapnite alebo vypnite stlačením tlačidla HEAT.

06 Vyberte dobu (10 alebo 15 minút). Pri výbere masážnej oblasti sa aktivuje automatické vypnutie, ktoré sa nastaví na 15 minút. Stlačením tlačidla časovača je možné automatické vypnutie nastaviť na 10 alebo 15 minút.

Upozornenie: Ak zmeníte čas na časovači, začne odpočítavať znova od nuly. Aby ste zabránili prehriatiu prístroja, zvolte maximálnu dobu masáže na začiatku a počas masáže ju nemeňte.

07 Ak chcete masáž ukončiť pred koncom zvolenej doby, stlačte tlačidlo POWER. Masážna hlavica sa vráti do východiskovej polohy. Neodpájajte zariadenie od siete počas prevádzky. Po vypnutí zariadenia vždy počkajte niekoľko okamihov, než sa hlavica vráti do svojej východiskovej polohy.

Čistenie

⚠ údržba

- 01 Odpojte sedák od zdroja napájania a počkajte niekoľko minút, než ho začnete čistiť.
- 02 Vyčistite ho mäkkou, mierne navlhčenou špongiou.
- 03 Nikdy nedovoľte, aby voda alebo iná tekutina prišla do kontaktu s podložkou.
- 04 Pri čistení ho neponárajte do kvapaliny.
- 05 Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kefy alebo riedidlá.
- 06 Pred opätovným použitím počkajte, až bude zariadenie úplne suché.

Skladovanie

Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, odporúčame ho uchovávať v pôvodnom obale na suchom mieste a nepokladať naň žiadne predmety. Zariadenie môžete tiež zavesiť do šatníkovej skrine pomocou vešiaku. K tomu treba zasunúť vešiak do závesného popruhu umiestnenom na boku zariadenia. Uistite sa, že používate stabilný drevený vešiak, ktorý unesie váhu zariadenia. Vyvarujte sa kontaktu s ostrými hranami a inými špicatými predmetmi, ktoré by mohli porezať alebo prepichnúť povrch látky. Nevešajte vankúš za kábel ručného ovládania alebo napájacieho kábla.

🔧 Odstraňovanie problémov

☹ Problém	❓ Príčina	😊 Riešenie
Masážne hlavice sa pohybujú príliš pomaly	Masážne hlavice sú vystavené nadmernému namáhaniu	Znížte tlak pri masáži
Masážne hlavice sa pohybujú iba v hornej alebo dolnej oblasti	Masáž bola aktivovaná iba pre určitú oblasť	Stlačením tlačidla celá, horná časť chrbta alebo dolná časť chrbta zmeníte/rozšírite masážnu oblasť
Masážne hlavice sa nepohybujú	Zariadenie nie je zapojené	Pripojte zariadenie a zapnite ho
	Zariadenie nie je zapnuté	Zapnite masážny prístroj pomocou tlačidla POWER Vyberte oblasť, ktorú chcete masírovať
	Spustil sa systém ochrany proti prehriatiu, zariadenie je poškodené	Kontaktujte predajcu alebo popredajné oddelenie

Technické údaje

- Označenie produktu: LA110318
- Napájanie: 12VDC, 2,5A
- Rozmery: 108 x 40 x 10,9 cm
- Hmotnosť: cca. 9,0 kg



Poradenstvo pri likvidácii odpadu

— Celý obal je vyrobený z ekologicky bezpečných materiálov, ktoré je možné odovzdať vo vašom miestnom triediacom stredisku a použiť ich ako druhotné suroviny. Kartón je možné umiestniť do koša na recykláciu papiera. Obalovú fóliu odnesť do miestneho triediaceho a recyklačného strediska. Akonáhle prístroj prestane byť používaný, zlikvidujte ho ekologicky av súlade s právnymi predpismi.

Obmedzená záruka


Lanaform poskytuje na tento produkt záruku na akúkoľvek materiálovú alebo výrobnú vadu po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu, s výnimkou prípadov popísaných nižšie.


Záruka Lanaform sa nevzťahuje na spôsobené škody v dôsledku bežného opotrebovania. Zároveň záruka nepokryje poškodenie spôsobené hrubým, nevhodným alebo

nesprávnym použitím, nehody, použitie neschváleného príslušenstva, zmeny vykonané na produkte alebo iné okolnosti akéhokoľvek druhu, ktoré sú mimo kontroly Lanaform. Spoločnosť Lanaform nemôže niesť zodpovednosť za žiadny typ značnej, nepriamej alebo špecifickej škody.

Všetky implicitné záruky týkajúce sa vhodnosti produktu sú obmedzené na dobu dvoch rokov od prvého dátumu nákupu, pokiaľ je možné dodať kópiu dokladu o kúpe.

Po obdržaní vášho zariadenia Lanaform opraví alebo vymení váš spotrebič podľa svojho uváženia a vráti vám ho. Záruka je platná iba prostredníctvom servisného centra Lanaform. Akýkoľvek pokus o údržbu tohto produktu osobou inou ako servisným strediskom spoločnosti Lanaform spôsobí neplatnosť tejto záruky.







LANAFORM

Bodyscan Massager
LA110318 / LOT 001

Manufacturer & Importer

Lanaform SA

Postal Address

Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

+32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com