

LANAFORM


COMFORT

Heating Pillow

CORDLESS HEATED CUSHION





1

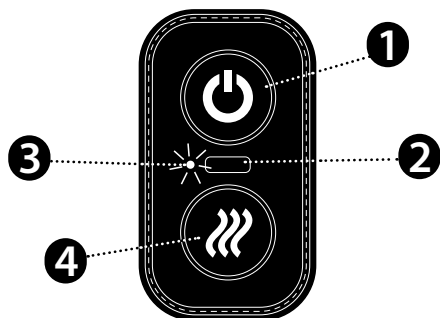

2



3

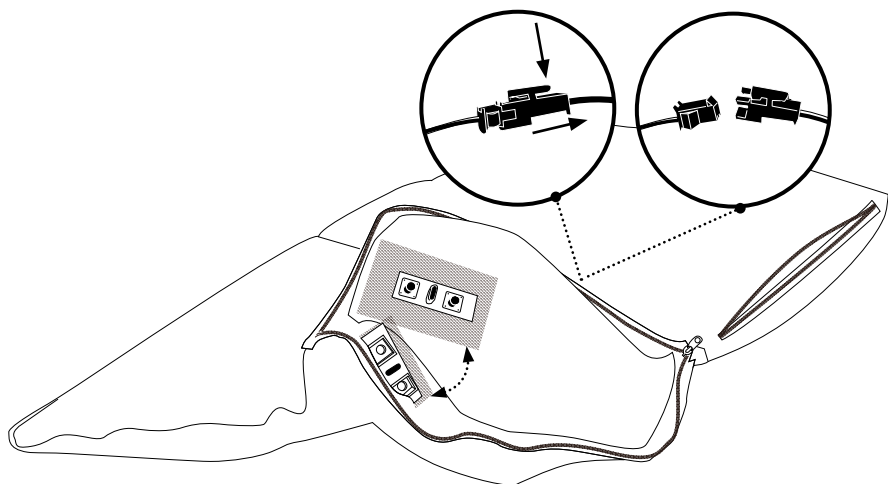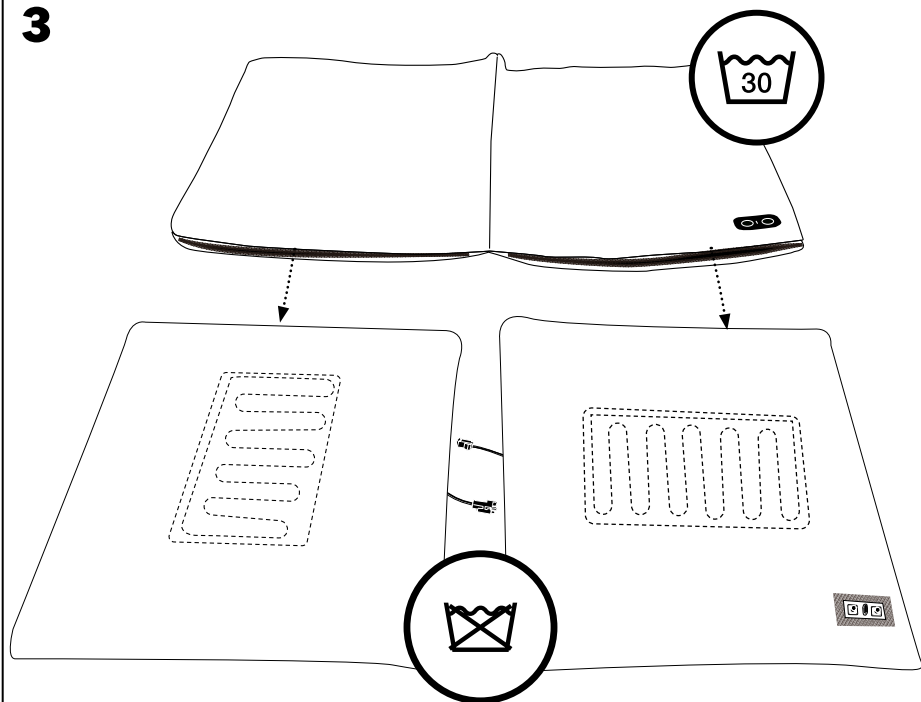

Obsah balení

Zkontrolujte, zda je vnější karton zařízení neporušený a zda jsou přítomny všechny položky. Před použitím se ujistěte, že zařízení a příslušenství nejeví žádné viditelné známky poškození a že byl odstraněn celý obal. V případě pochybností zařízení nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo uvedené oddělení zákaznických služeb.

- 1 vyhřívací polštář
- 1 USB kabel
- 1 návod k obsluze

Vysvětlení symbolů

V návodu k použití, na obalu a na typovém štítku zařízení se používají následující symboly:

	VAROVÁNÍ: Výstražný pokyn upozorňující na riziko zranění nebo ohrožení vašeho zdraví
	POZOR: Bezpečnostní upozornění upozorňující na možné poškození zařízení/příslušenství
	POZNÁMKA: Poznámka k důležitým informacím
	Zlikvidujte v souladu s evropskou směrnicí OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zařízení)
	Přečtěte si pokyny
	Zařízení má dvojistou izolaci, a proto splňuje ochrannou třídu 2
	Nepropichujte jehlami
	Nepoužívejte, když je složený nebo srolovaný
	Není určeno pro malé děti (0-3 roky)
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Maximální teplota praní 30 °C, ultrajemný cyklus
	Nebělit
	Nesušit v sušičce

	Nežehlit
	Nečistit chemicky
	Výrobce
	Oddělte výrobek a obalové komponenty a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Oddělte obalové komponenty a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Papírové obaly jsou buď recyklovatelné, nebo vyrobené z recyklovaných materiálů

Důležité pokyny. Uchovejte pro pozdější použití

 **Před použitím produktu si prosím přečtěte všechny pokyny, zejména těchto několik základních bezpečnostních pokynů.**

 **Fotografie a další obrázky produktů v tomto návodu a na obalu jsou co nejpřesnější, avšak nemusejí představovat přesnou reprodukci skutečného výrobku.**

Varování

- **Toto zařízení používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.**
- **Před zapojením zařízení zkontrolujte, zda je napětí vaší elektrické sítě stejné jako napětí zařízení.**
- **Děti mladší tří let nesmí toto zařízení používat, protože nedokážou reagovat v případě přehřátí.**
- **Zařízení mohou používat děti ve věku od 3 do 8 let pod dohledem, přičemž regulátor musí být vždy nastaven na minimální hodnotu teploty.**
- **Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném**

používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- **Tento vyhřívací polštář není určen k použití v nemocnici. Tento produkt je určen pouze pro domácí použití.**
- **Nikdy nepoužívejte toto zařízení v místnosti, ve které se používají aerosoly (spreje), ani v místnosti, ve které se podává kyslík.**
- **Nepoužívejte vyhřívací polštář s jinými topnými zařízeními ani k ohřevu jiných věcí (ohřívač nohou, termoform atd.).**
- **Pokud používáte elektrický vyhřívací polštář po dobu několika hodin, doporučuje se nastavit přepínač na nižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí.**
- **Nesvírejte polštář (zejména u postelí s variabilními polohami nebo u matrací s oddělenými prvky).**
- **Nepoužívejte vyhřívací polštář na zvířatech.**
- **Vždy po použití nebo před čištěním zařízení odpojte ze zásuvky.**

- **Chcete-li zařízení odpojit, vypněte jej** stisknutím tlačítka ON/OFF, v případě potřeby odpojte kabel USB a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- **Pokud se vyhřívací polštář abnormálně zahřívá, odpojte jej.**
- **Pokud zařízení spadne do vody, ihned jej odpojte ze zásuvky, než jej vytáhnete.**
- **Pokud budete vyhřívací polštář skladovat delší dobu, skladujte jej na suchém místě.** Před prvním použitím pečlivě zkontrolujte jeho stav. Pokud je kabel USB poškozen, musí být vyměněn za stejný typ kabelu, který je k dispozici u dodavatele nebo v jeho poprodejním oddělení.
- **Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno společností LANAFORM nebo které nebylo dodáno s tímto zařízením.**
- **Používejte vyhřívací polštář s přiloženým USB kabelem nebo ekvivalentním kabelem.**
- **Nepřenášejte toto zařízení za kabel USB ani jej nepoužívejte jako rukojeť.**
- **Elektrické zařízení nesmí být nikdy ponecháno zapojené do zásuvky bez dozoru.** Odpojte ho ze zásuvky, kdykoli jej nepoužíváte.
- **Nepoužívejte toto zařízení, pokud je zástrčka poškozená, pokud zařízení nefunguje správně, pokud upadlo na podlahu, pokud je poškozené nebo pokud spadlo do vody.** Pokud se stane některá z těchto věcí, nechte zařízení zkontrolovat a opravit dodavatelem nebo jeho poprodejním oddělením.
- **Kabely příliš silně netahejte, nekrutěte**

ani neohýbejte.

- **Nepoškrábejte vyhřívací polštář ostrým předmětem.** Nepřipevňujte vyhřívací polštář pomocí špendlíků nebo jiných kovových předmětů.
- **Nevystavujte vyhřívací polštář slunečnímu záření a nežehlete ho.** Tím zabráníte poškození izolace elektrického obvodu.
- **Nepoužívejte vyhřívací polštář, když je mokrý, a nezapínejte ho, aby vyschl.**
- **Dodržujte veškerá opatření, abyste se vyhnuli popáleninám.**
- **Pokud máte obavy o své zdraví, poraďte se před použitím tohoto zařízení s lékařem.**
- **Pokud při používání tohoto zařízení pocítíte jakoukoli bolest, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.**
- **Nikdy nepoužívejte toto zařízení na žádné části těla, která je oteklá nebo zanícená, nebo pokud máte vyrážku.**
- **Pokud si při používání vyhřívací polštářky všimnete známek abnormálního zarudnutí kůže nebo dokonce pocitu nepohodlí či bolesti, přestaňte ji alespoň na jednu hodinu používat.** Pokud jev přetrvává, používání polštářku odložte a v případě potřeby se okamžitě poraďte s lékařem.
- **Elektrická a magnetická pole tohoto elektrického zařízení mohou rušit činnost kardiostimulátorů.** Jejich hodnota je však hluboko pod limity: intenzita elektrického pole: max. 5 000 V/m, intenzita magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT. Proto se před použitím

této elektrické vyhřívané deky poradte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.

- **Uživatel** může při usínání s přístrojem nastaveným na vysokou teplotu utrpět popáleniny kůže nebo tepelný šok.
- Při skladování nechte zařízení před složením vychladnout.
- Zařízení často kontrolujte, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte známky opotřebení nebo poškození, nebo pokud bylo zařízení používáno nesprávně nebo nefunguje, vraťte jej dodavateli před opětovným zapnutím.

Kabel zařízení může při nesprávném uspořádání způsobit zamotání, udušení, zakopnutí nebo rozdrcení. Uživatel musí zajistit, aby vyčnívající spoje a kabel byly uspořádány bezpečným způsobem.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vyhřívací polštář LANAFORM. Tento pohodlný a univerzální produkt 2 v 1 potěší i ty největší zimomřivce. Díky rychlému ohřevu poskytne během několika minut příjemné, uklidňující teplo a postará se o vaše maximální pohodlí. Je vybaven dobíjecí baterií a dvěma úrovněmi intenzity, takže si můžete dopřát relaxaci a teplo přesně podle svých potřeb – ať už ho použijete jako klasický vyhřívací polštář, nebo jako vyhřívaný potah na sedadlo.

Popis 1

- 01 **Tlačítko ZAP/VYP**
- 02 **USB konektor**
- 03 **LED indikátor zapnutí/
vypnutí a teploty**
- 04 **Nastavení teploty**

Příprava před použitím 1 & 2

Vyhřívací polštář LANAFORM je určen k ohřevu lidského těla. Měl by být použit buď:

Jako polštář:

V tomto případě se ujistěte, že je polštář zavřený pomocí zipu na boku výrobku

Jako vyhřívaný potah sedadla:

Rozložte polštář otevřením zipu po jeho obvodu. Topné zóny se nacházejí na vnějších plochách polštáře (tam, kde je umístěno tlačítko **On/Off**). Při používání polštáře jako potahu na sedadlo jej umístěte tak, aby tlačítko **On/Off** směřovalo k části těla, kterou chcete zahřívát.

Nabíjení 2

Zařízení můžete nabíjet pomocí dodaného kabelu USB. Připojte nabíjecí kabel USB k vhodnému napájecímu adaptéru a k zařízení. Poté zapojte napájecí adaptér do odpovídající elektrické zásuvky (2,0 A).

Během nabíjení červený kontrolní indikátor pulzuje, což znamená, že se pomalu opakovaně rozsvěcuje a zhasíná.

Jakmile je zařízení plně nabitě, kontrolka se rozsvítí zeleně. Nezapínejte polštář během nabíjení, protože pokud je výrobek zapnutý, proces nabíjení nebude rozpoznán.

Bezpečnost

Tento vyhřívací polštář je vybaven bezpečnostním systémem. Elektronický senzor zabráňuje přehřátí polštáře na celé jeho ploše tím, že jej v případě poruchy automaticky vypne. Vyhřívací polštář je vybaven ochranou proti nadměrnému zahřátí a je nastaven na nepřetržitý provoz po dobu 45 minut.

Pokyny

- Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 2 sekund. Rozsvítí se zelená LED kontrolka
- Vyhřívací polštář má 2 úrovně intenzity teploty. Vyberte požadovanou úroveň (zelená LED = nízká intenzita a červená LED = vysoká intenzita) postupným stisknutím příslušného tlačítka.
- Jakmile je baterie nabitá, vyhřívací polštář bude fungovat přibližně 90 minut. Vyhřívací polštář je také možné použít s adaptérem. Za tímto účelem zasuněte kabel USB do konektoru a připojte adaptér do elektrické zásuvky.

Upozornění

Pokud červený nebo zelený kontrolní indikátor bliká rychleji, znamená to, že je třeba baterii dobít! V takovém případě **zařízení vypněte** stisknutím tlačítka ON/OFF a postupujte podle výše uvedených kroků pro nabíjení.

Poznámka: Pokud zařízení předem nevypnete, bude nadále blikat červeně/zeleně a nebude se nabíjet. Chcete-li používat polštář při zapojení do sítě a kontrolka rychle bliká, musí se baterie před zahájením ohřevu nabíjet alespoň 15 minut.

Pokud používáte vyhřívací polštář s adaptérem, mějte prosím na paměti, že USB port se může výrazně zahřát. Během používání produktu se ho nedotýkejte.

Čištění a údržba 3

Pokud vyhřívací polštář nepoužíváte a před jeho čištěním dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
- V případě potřeby odpojte adaptér a kabel USB.
- Před čištěním nechte vyhřívací polštář vychladnout.

Potah polštáře lze sejmut a prát v pračce na 30 °C na program pro jemné tkaniny.

- 01 Otevřete 2 zipy, abyste získali přístup k vyhřívacím podložkám.
- 02 Poté odstraňte suchý zip z řídicí jednotky.
- 03 Odpojte propojovací kabel mezi 2 vyhřívacími podložkami.
- 04 Poté sejměte 2 vyhřívací podložky. Nyní můžete potah prát v pračce.
- 05 Jakmile je potah vypraný v pračce a usušený na vzduchu, vložte 2 vyhřívací podložky a znovu je připojte.
- 06 Bezpečně umístěte řídicí jednotku na místo a ujistěte se, že je konektor USB správně umístěn.
- 07 Zapněte zipy. Nyní můžete používat vyhřívací polštář

Polštář lze čistit ručně vlhkým hadříkem nebo houbou a vodou, případně s trochu tekutého pracího prostředku na jemné tkaniny.

 **Dávejte pozor, abyste vyhřívací polštář nevkládali do pračky ani jej nečistili chemicky. Neměl by být kroucen, sušen v pračce ani žehlen.**

Při sušení polštáře jej nezavěšujte na kolíčky na prádlo ani na podobné předměty. Nevystavujte vyhřívací polštář zdrojům tepla, jako je slunce, radiátor atd.

 **Za žádných okolností nezapínejte vyhřívací polštář, abyste ho vysušili.**

Skladování

Pokud polštář delší dobu nepoužíváte, doporučuje se jej skladovat v originálním obalu na suchém místě a nepokládat na něj žádné předměty

❖ Řešení problémů

⊖ Problém	⊕ Důvod	😊 Řešení
Polštář se nezahřívá	Baterie vybitá	Připojte kabel USB ke konektoru polštáře a k adaptéru pro dobíjení baterie nebo používejte polštář s připojeným USB kabelem přímo do zásuvky.

Technické údaje

- Referenční číslo produktu: LA180504
- Napětí: DC5V 2,0A
- Výkon: 10 W
- Rozměry: 42 x 42 x 11 cm



Pokyny pro likvidaci odpadu

Obal se skládá výhradně z ekologicky šetrných materiálů, které lze odevzdat ve vašem místním třídícím středisku a použít jako druhotné suroviny. Karton lze vložit do nádoby na sběr papíru. Balicí fólie by měly být odevzdány ve vašem místním třídícím a recyklačním středisku.

Pokud již zařízení nepoužíváte, zlikvidujte jej ekologickým způsobem a v souladu se zákonnými předpisy.

Omezená záruka

Společnost LANAFORM zaručuje, že tento výrobek nebude mít po dobu dvou let od data zakoupení žádné vady materiálu a zpracování, s výjimkou níže uvedených vad.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením výrobku. Záruka na tento výrobek LANAFORM se dále nevztahuje na žádné škody způsobené nesprávným nebo nesprávným použitím, nehodami, připojováním neoprávněného příslušenství, úpravou výrobku nebo jakýmkoli jinými okolnostmi mimo kontrolu společnosti LANAFORM.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za žádný druh náhodných, následných nebo zvláštních škod.

Veškeré implicitní záruky vhodnosti produktu jsou omezeny na dobu dvou let od data původního nákupu, za předpokladu, že lze předložit kopii dokladu o koupi.

Po obdržení vám společnost LANAFORM zařízení opraví nebo vymění, dle potřeby, a vrátí vám jej. Reklamací ze záruky lze uplatnit pouze prostřednictvím servisního střediska LANAFORM. Jakákoli údržba tohoto produktu svěřená jiné osobě než servisnímu středisku LANAFORM ruší tuto záruku.

Obsah balenia

Skontrolujte, či je vonkajší kartón zariadenia neporušený a či sú prítomné všetky položky. Pred použitím sa uistite, že zariadenie a príslušenstvo nejaví žiadne viditeľné známky poškodenia a že bol odstránený celý obal. V prípade pochybností zariadenie nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo uvedené oddelenie zákazníckych služieb.

- 1 vyhrievací vankúš
- 1 USB kábel
- 1 návod na obsluhu

Vysvetlenie symbolov

V návode na použitie, na obale a na typovom štítku zariadenia sa používajú nasledujúce symboly:

	VAROVANIE: Výstražný pokyn upozorňujúci na riziko zranenia alebo ohrozenia vášho zdravia
	POZOR: Bezpečnostné upozornenie upozorňujúce na možné poškodenie zariadenia/príslušenstva
	POZNÁMKA: Poznámka k dôležitým informáciám
 	Zlikvidujte v súlade s európskou smernicou OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariadení)
	Prečítajte si pokyny
	Zariadenie má dvojité izoláciu, a preto spĺňa ochrannú triedu 2
	Neprepichujte ihlami
	Nepoužívajte, keď je zložený alebo zrolovaný
	Nie je určené pre malé deti (0-3 roky)
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.
	Maximálna teplota prania 30 °C, ultrajemný cyklus
	Nebieliť

	Nesušiť v sušičke
	Nežehliť
	Nečistiť chemicky
	Výrobca
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.
	Oddelte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.
	Papierové obaly sú buď recyklovateľné, alebo vyrobené z recyklovaných materiálov

Dôležité pokyny. Uchovajte na neskoršie použitie

 **Pred použitím produktu si prosím prečítajte všetky pokyny, najmä týchto niekoľko základných bezpečnostných pokynov..**

 **Fotografie a ďalšie obrázky produktov v tomto návode a na obale sú čo najpresnejšie, avšak nemusia predstavovať presnú reprodukciu skutočného výrobku.**

Varovanie

- Toto zariadenie používajte iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či je napätie vašej elektrickej siete rovnaké ako napätie zariadenia.
- Deti mladšie ako tri roky nesmú toto zariadenie používať, pretože nedokážu reagovať v prípade prehriatia.
- Zariadenia môžu používať deti vo veku od 3 do 8 rokov pod dohľadom, pričom regulátor musí byť vždy nastavený na minimálnu hodnotu teploty.
- Toto zariadenie môžu používať deti

od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Tento vyhrievací vankúš nie je určený na použitie v nemocnici. Tento produkt je určený iba na domáce použitie.
- Nikdy nepoužívajte toto zariadenie v miestnosti, v ktorej sa používajú aerosóly (spreje), ani v miestnosti, v ktorej sa podáva kyslík.
- Nepoužívajte vyhrievací vankúš s inými vykurovacími zariadeniami ani na ohrev iných vecí (ohrievač nôh, termofoor atď.).
- Pokiaľ používate elektrický vyhrievací vankúš po dobu niekoľkých hodín, odporúča sa nastaviť prepínač na najnižšiu

teplotu, aby sa zabránilo prehriatiu.

- **Nezvierajte vankúš** (najmä pri posteliach s variabilnými polohami alebo pri matracoch s oddelenými prvkami).

- **Nepoužívajte vyhrievací vankúš** na zvieratách.

- **Vždy po použití alebo pred čistením zariadenie odpojte** zo zásuvky.

- **Ak chcete zariadenie odpojiť**, vypnite ho stlačením tlačidla ON/OFF, v prípade potreby odpojte kábel USB a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- **Pokiaľ sa vyhrievací vankúš abnormálne zahrieva**, odpojte ho.

- **Pokiaľ zariadenie spadne do vody**, ihneď ho odpojte zo zásuvky, než ho vytiahnete.

- **Pokiaľ budete vyhrievací vankúš skladovať dlhšiu dobu**, skladujte ho na suchom mieste. Pred prvým použitím starostlivo skontrolujte jeho stav. Ak je kábel USB poškodený, musí byť vymenený za rovnaký typ kábla, ktorý je k dispozícii u dodávateľa alebo v jeho popredajnom oddelení.

- **Nepoužívajte príslušenstvo**, ktoré nie je odporúčané spoločnosťou LANAFORM alebo ktoré nebolo dodané s týmto zariadením.

- **Používajte vyhrievací vankúš** s priloženým USB káblom alebo ekvivalentným káblom.

- **Neprenášajte toto zariadenie za kábel USB** ani ho nepoužívajte ako rukoväť.

- **Elektrické zariadenie nesmie byť nikdy ponechané zapojené do zásuvky bez dozoru**. Odpojte ho zo zásuvky, kedykoľvek ho nepoužívate.

- **Nepoužívajte toto zariadenie**, ak je zástrčka poškodená, pokiaľ zariadenie nefunguje správne, ak spadlo na podlahu, ak je poškodené alebo ak spadlo do vody. Pokiaľ sa stane niektorá z týchto vecí, nechajte zariadenie skontrolovať a opraviť dodávateľom alebo jeho popredajným oddelením.

- **Káble príliš silno neťahajte**, nekrúťte ani neohýbajte.

- **Nepoškriabte vyhrievací vankúš ostrým predmetom**. Nepripevňujte vyhrievací vankúš pomocou špendlíkov alebo iných kovových predmetov.

- **Nevystavujte vyhrievací vankúš slnečnému žiareniu a nezhľite ho**. Tým zabránite poškodeniu izolácie elektrického obvodu.

- **Nepoužívajte vyhrievací vankúš**, keď je mokrý, a nezapínajte ho, aby vyschol.

- **Dodržujte všetky opatrenia**, aby ste sa vyhli popáleninám.

- **Ak máte obavy o svoje zdravie**, poraďte sa pred použitím tohto zariadenia s lekárom.

- **Ak pri používaní tohto zariadenia pocítite akúkoľvek bolesť**, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.

- **Nikdy nepoužívajte toto zariadenie** na žiadne časti tela, ktorá je opuchnutá alebo zapálená, alebo ak máte vyrážku.

- **Pokiaľ si pri používaní vyhrievacej vankúšiky všimnete známok abnormálneho začervenania kože alebo dokonca pocitu nepohodlia či bolesti**, prestaňte ju aspoň na jednu hodinu používať. Pokiaľ jav pretrváva, používanie vankúšika odložte av prípade potreby sa okamžite

poradte s lekárom.

- Elektrické a magnetické polia tohto elektrického zariadenia môžu rušiť činnosť kardiostimulátorov. Ich hodnota je však hlboko pod limitmi: intenzita elektrického poľa: max. 5 000 V/m, intenzita magnetického poľa: max. 80 A/m, magnetická indukcia: max. 0,1 mT. Preto sa pred použitím tejto elektrickej vyhrievanej deky poradte so svojím lekárom a výrobcom kardiostimulátora.

- Užívateľ môže pri zaspávaní s prístrojom nastaveným na vysokú teplotu utrpieť popáleniny kože alebo tepelný šok.

- Pri skladovaní nechajte zariadenie pred zložením vychladnúť.

- Zariadenie často kontrolujte, či nejavia známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak zistíte známky opotrebenia alebo poškodenia, alebo ak bolo zariadenie používané nesprávne alebo nefunguje, vráťte ho dodávateľovi pred opakovaným zapnutím.

Kábel zariadenia môže pri nesprávnom usporiadaní spôsobiť zamotanie, udušenie, zakopnutie alebo rozdrvenie. Užívateľ musí zaistiť, aby vyčnievajúce spoje a kábel boli usporiadané bezpečným spôsobom.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali vyhrievací vankúš LANAFORM. Tento pohodlný a univerzálny produkt 2 v 1 poteší aj tie najväčšie zimomrivky. Vďaka rýchlemu ohrevu poskytne v priebehu niekoľkých minút príjemné, upokojujúce teplo a postará sa o vaše maximálne pohodlie. Je vybavený dobíjacou batériou a dvoma úrovňami intenzity, takže si môžete dopriať relaxáciu a

teplo presne podľa svojich potrieb – či už ho použijete ako klasický vyhrievací vankúš, alebo ako vyhrievaný poťah na sedadlo.

Popis 1

01 Tlačidlo ZAP/VYP <č. 1>

02 USB konektor <#>

03 LED indikátor zapnutia/vypnutia a teploty <#>

04 Nastavenie teploty <#>

Príprava pred použitím 1 et 2

Vyhrievací vankúš LANAFORM je určený na ohrev ľudského tela. Mal by byť použitý buď Ako vankúš:

V tomto prípade sa uistite, že je vankúš zatvorený pomocou zipsu na boku výrobku

Ako vyhrievaný poťah sedadla:

Rozložte vankúš otvorením zipsu po celom jeho obvode. Vyhrevné zóny sa nachádzajú na vonkajších stranách vankúša (tam, kde sa nachádza tlačidlo Zap./Vyp.). Keď vankúš použivate ako sedáciu podložku, uistite sa, že je umiestnený tak, aby tlačidlo Zap./Vyp. smerovalo k časti tela, ktorú si želáte ohriať.

Nabíjanie 2

Zariadenie môžete nabíjať pomocou dodaného USB kábla. Pripojte nabíjací USB kábel k vhodnému sieťovému adaptéru a k zariadeniu. Následne zapojte adaptér do vhodnej elektrickej zásuvky (2,0 A).

Počas nabíjania pulzuje červený kontrolný indikátor - pomaly sa rozsviecuje a zhasína v pravidelných intervaloch. Keď je zariadenie plne nabité, indikátor sa rozsvieti na zeleno.

Dávajte pozor, aby ste počas nabíjania nezapli vyhrevný vankúš – v takom prípade sa batéria nenabíja.

Sécurité

Tento výhrevný vankúš je vybavený bezpečnostným systémom. Elektronický senzor zabránuje prehriatiu celej plochy vankúša tým, že sa v prípade poruchy automaticky vypne.

Výhrevný vankúš je vybavený bezpečnostnou ochranou proti prehriatiu a je nastavený na nepretržitú prevádzku počas 45 minút.

Pokyny

- 01 Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF po dobu 2 sekúnd. Rozsvieti sa zelená LED kontrolka
- 02 Vyhrievací vankúš má 2 úrovne intenzity teploty. Vyberte požadovanú úroveň (zelená LED = nízka intenzita a červená LED = vysoká intenzita) postupným stlačením príslušného tlačidla.
- 03 Hneď ako je batéria nabitá, vyhrievací vankúš bude fungovať približne 90 minút. Vyhrievací vankúš je tiež možné použiť s adaptérom. Za týmto účelom zasuňte kábel USB do konektora a pripojte adaptér do elektrickej zásuvky.

Upozornenie

Ak červený alebo zelený kontrolný indikátor bliká rýchlejšie, znamená to, že batériu je potrebné nabiť! V takom prípade **zariadenie vypnite** stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** a postupujte podľa pokynov na nabíjanie uvedených vyššie.

Poznámka: Ak zariadenie nie je najprv vypnuté, bude naďalej blikáť na červeno/zeleno a nenabije sa.

Ak chcete používať výhrevný vankúš zapojený do elektrickej siete a kontrolka rýchlo bliká, je potrebné nechať batériu nabíť aspoň 15 minút pred zapnutím ohrevu.

Ak používate výhrevný vankúš pomocou adaptéra, vezmite na vedomie, že USB port sa môže výrazne zahriať. Počas používania

výrobku sa ho, prosím, nedotýkajte.

Čistenie a údržba 3

Pokiaľ vyhrievací vankúš nepoužívate a pred jeho čistením dodržujte tieto pokyny:

- Skontrolujte, či je spotrebič vypnutý.
- V prípade potreby odpojte adaptér a kábel USB.
- Pred čistením nechajte vyhrievací vankúš vychladnúť.

Poťah vankúša je možné sňať a prať v práčke na 30 °C na program pre jemné tkaniny.

- 01 Otvorte 2 zipsy, aby ste získali prístup k vyhrievacím podložkám.
- 02 Potom odstráňte suchý zips z riadiacej jednotky.
- 03 Odpojte prepojovací kábel medzi 2 vyhrievacími podložkami.
- 04 Potom odoberte 2 vyhrievacie podložky. Teraz môžete poťah prať v práčke.
- 05 Akonáhle je poťah vypraný v práčke a usušený na vzduchu, vložte 2 vyhrievacie podložky a znovu ich pripojte.
- 06 Bezpečne umiestnite riadiacu jednotku na miesto a uistite sa, že je konektor USB správne umiestnený.
- 07 Zapnite zipsy. Teraz môžete používať vyhrievací vankúš

Vankúš je možné čistiť ručne vlhkou handričkou alebo špongiou a vodou, prípadne s trochou tekutého pracieho prostriedku na jemné tkaniny.

 **Dávajte pozor, aby ste vyhrievací vankúš nevkladali do práčky ani ho nečistili chemicky. Nemal by byť krútený, sušený v práčke ani žehlený.**

Pri sušení vankúša ho nevešajte na štipce na bielizeň ani na podobné predmety. Nevysušujte vyhrievací vankúš zdrojom tepla, ako je slnko, radiátor atď.



Za žiadnych okolností nezapínajte vyhrievací vankúš, aby ste ho vysušili

Skladovanie

Pokiaľ vankúš dlhšiu dobu nepoužívate, odporúča sa ho skladovať v originálnom obale na suchom mieste a neklásť naň žiadne predmety

Riešenie problémov

⚠ Problém	🔍 Dôvod	😊 Riešenie
Vankúš sa nezahrieva	Batéria vybitá	Pripojte kábel USB ku konektoru vankúša ak adaptéru na dobíjanie batérie alebo používajte vankúš s pripojeným USB káblom priamo do zásuvky.

Technické údaje

- Referenčné číslo výrobku: LA180504
- Napätie: DC5V 2,0A
- Výkon: 10 W
- Rozmery: 42 x 42 x 11 cm



Pokyny na likvidáciu odpadu

Obal sa skladá výhradne z ekologicky šetrných materiálov, ktoré je možné odovzdať vo vašom miestnom triediacom stredisku a použiť ako druhotné suroviny. Kartón je možné vložiť do nádoby na zber papiera. Baliace fólie by mali byť odovzdané vo vašom miestnom triediacom a recyklačnom stredisku.

Pokiaľ už zariadenie nepoužívate, zlikvidujte ho ekologickým spôsobom av súlade so zákonnými predpismi.

Obmedzená záruka

Spoločnosť LANAFORM zaručuje, že tento výrobok nebude mať po dobu dvoch rokov od dátumu zakúpenia žiadne vady materiálu a spracovania, s výnimkou nižšie uvedených väd.

Záruka spoločnosti LANAFORM sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným opotrebovaním výrobku. Záruka na tento výrobok LANAFORM sa ďalej nevzťahuje na žiadne škody spôsobené nesprávnym alebo nesprávnym použitím, nehodami, pripájaním neoprávneného príslušenstva, úpravou výrobku alebo akýmikoľvek inými okolnosťami mimo kontroly spoločnosti LANAFORM.

Spoločnosť LANAFORM nenesie zodpovednosť za žiadny druh náhodných, následných alebo zvláštnych škôd.

Všetky implicitné záruky vhodnosti produktu sú obmedzené na dobu dvoch rokov od dátumu pôvodného nákupu, za predpokladu, že je možné predložiť kópiu dokladu o kúpe.

Po obdržaní vám spoločnosť LANAFORM zariadenie opraví alebo vymení, podľa potreby, a vráti vám ho. Reklamáciu zo záruky je možné uplatniť iba prostredníctvom servisného strediska LANAFORM. Akákoľvek údržba tohto produktu zverená inej osobe ako servisnému stredisku LANAFORM ruší túto záruku.



LANAFORM

HEATING PILLOW

LA180504 / LOT 001

MANUFACTURER & IMPORTER

LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS

RUE DE LA LÉGENDE, 55
4141 LOUVEIGNÉ, BELGIUM

+32 4 360 92 91

INFO@LANAFORM.COM

WWW.LANAFORM.COM