
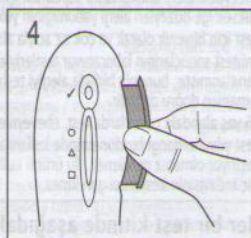
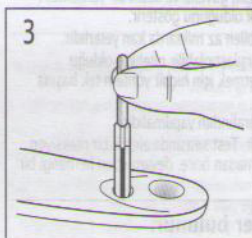
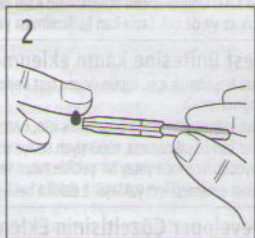


# EN: Imutest Specific IgE Allergy Tests

## CS: Specifické testy Imutest na alergie založené na protilátkách IgE

## DE: Spezifische Imutest-Allergie-Tests

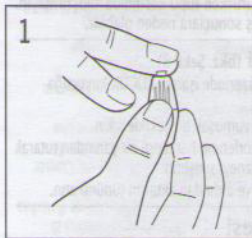

### EN: Test Results

#### Interpretation of results (see Figure 5)


##### Control line

A pink or red line opposite the  $\Delta$  symbol indicates the test has worked correctly.

No line should be visible opposite the  $\circ$  symbol.

A pink or red line opposite the  $\square$  symbol (irrespective of the intensity) indicates that high levels of IgE allergy antibodies have been detected and you may have a sensitivity to that specific allergen.

It is essential that you have, or have had at sometime in the past, symptoms for a positive result to be significant. Even a faint pink line opposite the  $\square$  symbol should be recorded as a positive result.

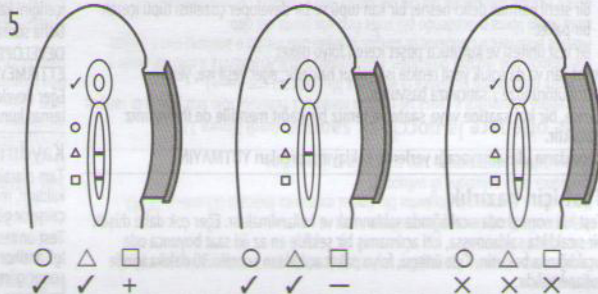

### CS: Výsledky testu

#### Interpretace výsledků (viz obrázek 5)

##### Kontrolní čárka

Růžová nebo červená čárka u symbolu  $\Delta$  značí, že test proběhl správně.

U symbolu  $\circ$  by neměla být vidět žádná čárka.

Růžová nebo červená čárka u symbolu  $\square$  indikuje (bez ohledu na intenzitu) vysoké úrovně alergických protilátek IgE a můžete být citliví na daný alergen.

Aby byl pozitivní výsledek významný, je důležité, zda máte nebo jste někdy v minulosti měli odpovídající příznaky. Jako pozitivní výsledek by měla být brána dokonce i slabě růžová čárka u symbolu  $\square$ .

### DE: Ihr Testergebnis

#### Interpretation des Ergebnisses (siehe Abbildung 5)

##### Kontrollbalken

Ein rosafarbener oder roter Balken neben dem Symbol  $\Delta$  deutet darauf, dass der Test korrekt durchgeführt wurde.

Neben dem Symbol  $\circ$  sollte kein Balken sichtbar sein.

Ein rosafarbener oder roter Balken neben dem Symbol  $\square$  bedeutet (unabhängig davon, wie intensiv die Färbung ist), dass eine erhöhte Menge an IgE-Allergienkörpern gemessen wurde und dass Sie möglicherweise gegen diesen speziellen Stoff allergisch sind.

Ein positives Ergebnis ist nur dann bedeutsam, wenn Sie tatsächlich Allergiesymptome haben oder in der Vergangenheit gehabt haben. Selbst ein blasser rosafarbener Balken neben dem Symbol  $\square$  sollte als positives Ergebnis gewertet werden.

### EN: Further information and advice:

Contact your local distributor or retailer directly, or via "Contact Us" at: [www.imutest.com](http://www.imutest.com)

Further help and information can be obtained from your pharmacist or doctor.

### CS: Další informace a rady:

Obraťte se na místního distributora nebo prodejce přímo nebo prostřednictvím odkazu „Contact Us“ na adrese: [www.imutest.com](http://www.imutest.com)

Další pomoc a informace získáte od svého lékárníka nebo lékaře.

### DE: Weitere Informationen und Beratung:

Kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler direkt oder über den Link „Kontakt“ unter: [www.imutest.com](http://www.imutest.com)

Weitere Hilfe und Informationen erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker.



EN: Consult Instructions for Use

CS: Viz návod k použití

DE: Gebrauchsanweisung beachten



EN: Do not reuse

CS: Pro jednorázové použití

DE: Nicht zur Wiederverwendung



EN: Contains sufficient for 1 test

CS: Lze použít pro 1 testů

DE: Inhalt ausreichend für 1 Prüfungen



EN: Temperature limitation

CS: Teplotní rozmezí od do

DE: Temperaturbegrenzung



EN: In Vitro Diagnostic Medical Device

CS: In Vitro diagnostický zdravotnický prostředek

DE: In-Vitro-Diagnostikum



EN: Manufacturer

CS: Výrobce

DE: Hersteller



Test Unit: Diagnostic Innovations Ltd. St. Asaph, LL17 0JA, U.K.



Finger Pricker: B.D. Vacutainer Systems, NJ 07417-1885, USA.

Supplied by: B.D. Plymouth, PL6 7BP, U.K.



Blood Tube: Safe-Tec Clinical Products, Ivyland PA, 18974, USA



Directive 98/79/EC



Directive 93/42/EC



Directive 98/79/EC

Rev. 11/2011

